

Ambu® Baby



Características Principales

- Sistema Higiénico Único Ambu
- Pulso Braquial
- Simulación de obstrucción de vías aéreas

Ambu® Baby

El Ambu Baby equivale a un bebé real de hasta un año de edad.

Su Sistema Higiénico Único de Ambu protege al estudiante y hace que la limpieza interna sea innecesaria.

Mira-escucha-siente. Como en la vida real, exhalación natural a través de la nariz y la boca que puede sentirse y oírse.

Su anatomía real le permite encontrar el punto de compresión correcto, y hace que la elevación del pecho / abdomen sea evidente.

La cabeza puede girarse y extenderse, pero las vías respiratorias solamente se abren en la posición correcta.

La distensión gástrica puede comprobarse visualmente sobre el estómago.

Especificaciones

Peso de maniquí	1,8 kg
Peso de maniquí con bolsa de transporte	2.5 Kg
Longitud de maniquí	40 cm
Cabeza	PVC rígido
Piel cara, torso, brazos y piernas	PVC blando
Bolsa de Cabeza	Polietileno




Ambu baby con su bolsa de transporte y contenido

Especificaciones para pedido

Ref.	Descripción
A 256 001 000	Ambu Baby, con 5 piezas faciales y 100 bolsas de cabeza. Suministrado en bolsa transporte semirígida.
256 000 702	Set de 100 bolsas de cabeza
256 000 703	Set de 5 piezas faciales



Simulador obstrucción vía aérea

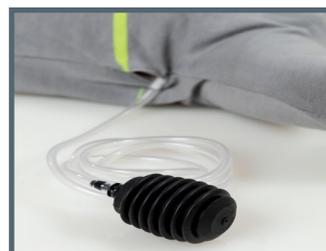

Bomba simulador pulso braquial

Firma Ambu S.L.

C/ Alcalá 261-265, Edf. 2-3.º dcha.
28027 Madrid
Tel. +34 91 411 68 30
www.ambu.es
ayuda@ambu.com